



Bima justerbar vagn



Målgrupp, kombinationer och prestanda



Den justerbara vagnen används tillsammans med Bima golvsits eller Bima skumplastfåtölj.

Bima golvsits används av personer som behöver mer stöd i sittandet än vad en standardstol kan ge. Fem standardstorlekar finns att beställa.

Bima skumplastfåtölj är en specialanpassad variant av Bima golvsits.

Vagnen justeras efter golvsitsens/ skumplastfåtöljens totala längd.



Vagnen är en medicinteknisk produkt.

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Kategori: 18 09 21

Vagnen är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340 - 419 50 eller via e-post:

info@bimasweden.se




Hantering

Avlägsna skyddsemballaget.

Vagnen är justerbar i längd. Mät längden på golvsitsen/ skumplastfåtöljen.

Lossa skruvarna 4st ca 2 varv.

Använd en insektsnyckel 5mm.

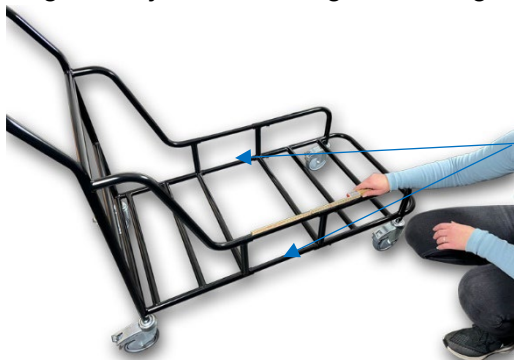


Drag ut till motsvarande längd.

Kontrollera att måttet är lika på båda sidor och drag åt skruvarna (inte för hårt).

Vagnens hjul är svängbara

och är försedda med låsfunktion för stopp av hjul och svängriktning.

För att aktivera låsfunktionen, tryck ner reglaget ovan hjulet för hand eller med foten. För att avaktivera låsfunktionen, gör på motsatt sätt.

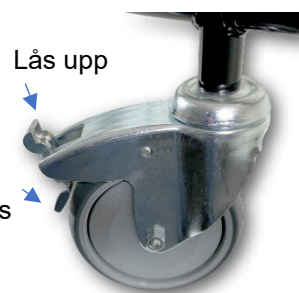

Bilden visar låst hjul



Rengöring och skötsel

Vagnen rengörs/ rekonditioneras genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. Eftertorka med mjukt papper eller torkduk.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att produkten fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (20år). Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel. Vagnen anses som förbrukad och ska bytas ut om den är har skador som påverkar funktionen. Hjul finns som reservdel och kan enkelt bytas ut av hjälpmedelstekniker eller av annan praktiskt kunnig person. Vid byte, lås gärna skruven som håller fast hjulenheten med gänglåsning.



Källsortering

Vagnen sorteras som metallavfall.



Försiktighetsåtgärder/ risker

1. Används och förvaras inomhus. Kan användas utomhus vid torrt väder.
2. Sittenhetens bredd ska passa vagnens bredd.
3. Vagnen är justerad mer än max justerbar längd eller för löst åtdragna skruvar, vagnen kan dela/vika sig på mitten.
4. För hårt åtdragna skruvar. Vagnen går inte att efterjustera på grund av deformation av det inre röret.
5. Klämrisk vid felaktig hantering av låsfunktionen.
6. För kort inställd längd kan ge tippriskt framåt.
7. Vältrisk vid förhöjning mer än 300mm av golvsitsen.
8. Felaktigt monterat bälte (tillbehör) Bältet ska monteras i vagnens ram.

Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB.

Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Art.nr	Mått och vikt	Max justerbar längd (mm)	Max brukar vikt (kg)
VAGN910-55ANP-SVART	Vagn stålrör svart golvs sitsbredd 35cm 550x900-1150x1050mm – 15,4 kg	250	150
VAGN910-60ANP-SVART	Vagn stålrör svart golvs sitsbredd 40cm 600x1010-1350x1050mm – 16,6 kg	340	150
VAGN910-65ANP-SVART	Vagn stålrör svart golvs sitsbredd 45cm 650x1010-1350x1050mm – 17,2 kg	340	150