

Bima active

Stadig tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för aktiva personer som föredrar en offensiv sittställning. Dynan lutar 5 grader framåt.



- ✓ Stadig och form stabil
- ✓ Formgjutet tryckfördelande sittskikt
- ✓ Plan sittyta för ökad rörlighet
- ✓ 5 graders framåtlutning
- ✓ Svag sittgrop
- ✓ Lätt konstruktion
- ✓ Vinklade kanter för ryggrör
- ✓ Kardborre hona på undersidan
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter


Konstruktion

Bima active är uppbyggd på en bas av polyeten EV 50) Det gör konstruktionen lätt och stadig. 42x50cm väger endast 1050 gram.

Framåtlutning 5 grader och en svag sittgrop.

Det formgjutna sittskiktet med hexagoner skapar luftighet och en god tryckfördelning.

Dynans främre del under lår har plan ovansida för ökad rörlighet.

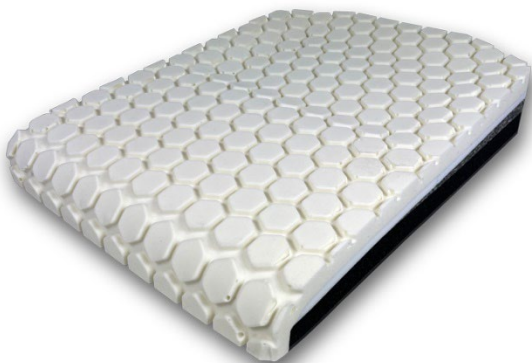

Bima active kan beställas med kupad eller plan botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämningskiva.

Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour.

Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget är försett med handtag.

Kardborre hona på undersidan

Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget finns heltäckande inkontinensöverdrag med sittyta av mjuk och luftig frotté. Vätsketät undersida av slitstark polyuretan.

Frottéytan har god värme- och fuktavledningsförmåga. Kardborrehona på undersidan. För att beställa lägg till -2 i slutet av artikelnumret.

T.ex. 70-4545-P-2

Anpassningar

Bima active kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö framför artikelnumret (Ö70-4545-P)

För att beställa extra heltäckande inkontinensöverdrag i luftig frotté ange Ö framför artikelnumret Ö70-4545-P-2

Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima active			Kupad botten -K			Plan botten -P		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot}	Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten			Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)	
Bredd	35/40	40/45	45/50	50/55				
33	70-3335-K	70-3340-K	70-3345-K	70-3350-K		9/5	135	
36	70-3635-K	70-3640-K	70-3645-K	70-3650-K		9/5	135	
39	70-3935-K	70-3940-K	70-3945-K	70-3950-K		9/5	135	
42	70-4235-K	70-4240-K	70-4245-K	70-4250-K		9/5	150	
45	70-4535-K	70-4540-K	70-4545-K	70-4550-K		9/5	150	
50	70-5035-K	70-5040-K	70-5045-K	70-5050-K		9/5	150	
33	70-3335-P	70-3340-P	70-3345-P	70-3350-P		8/4	135	
36	70-3635-P	70-3640-P	70-3645-P	70-3650-P		8/4	135	
39	70-3935-P	70-3940-P	70-3945-P	70-3950-P		8/4	135	
42	70-4235-P	70-4240-P	70-4245-P	70-4250-P		8/4	150	
45	70-4535-P	70-4540-P	70-4545-P	70-4550-P		8/4	150	
50	70-5035-P	70-5040-P	70-5045-P	70-5050-P		8/4	150	

Rekonditionering

Tvättas för hand med tvällösning eller sprayas försiktigt Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvällösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

Fakta

Klassificering: Tryckfördelande
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Dynans vikt: Bima active 42x50x8/4cm ca 1,05 kg

Material i dynbas: polyeten, polyeter, polyuretan

Material i överdrag: Svart laminerad velour, alternativt inkontinensskyddad mjuk frotté



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950
info@bimasweden.se
www.bimasweden.se